

MATERIEL GENERAL

- Planchette en bois / Plastique
- Ruban adhésif
- Elastique
- Tondeuse/ rasoir : rasage du site opératoire



MATERIEL OPTIQUE

Microscope : oculaire x10= grossissement de x 3,2 a x20

Distance confortable : hauteur de 20 cm entre le champ opératoire et l'objectif


Installation de l'opérateur :

- confortablement
- bord ulnaire des poignets posé sur le champ opératoire
- pause régulière

Manipulation :

- Plus faible grossissement
- oculaire sur position 0
 - Régler écartement pupillaire
 - Mise au point avec le plus fort grossissement
- Source lumineuse : hydrater régulièrement le champ opératoires +++

Matériel microchirurgical

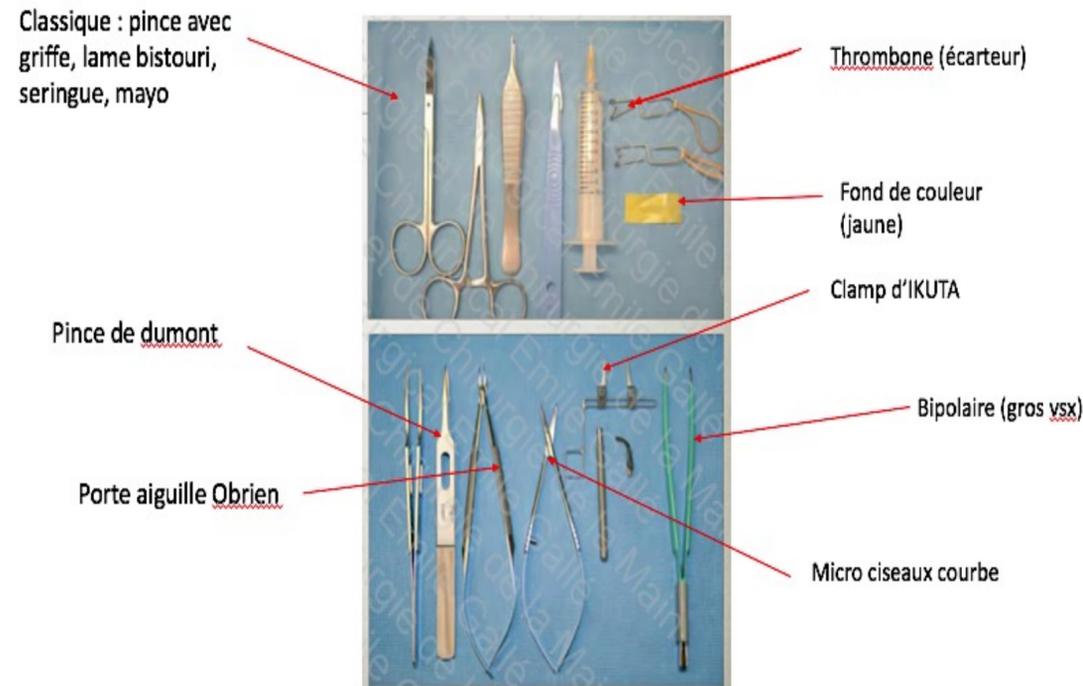

Clamp de tamai : simple ou double




FILS DE SUTURE

Nylon +++ (9/0 ; 10/0)
Aiguille ronde de 70 micron de diam ; Courbure 3/8



MODELE ANIMAL

Rat = animal de choix ++
Type : rat albinos de souche WISTAR
Poids minimum = 220g
IOPS : indemne d'organisme pathogène spécifique

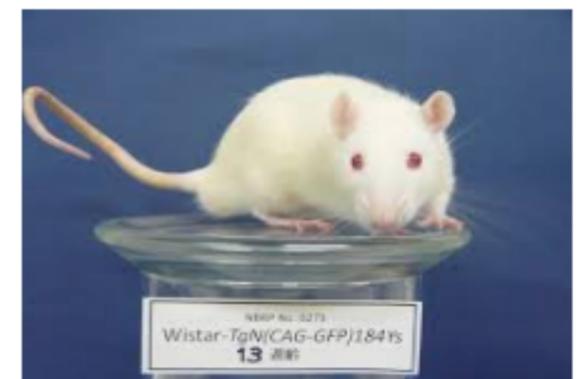

Installation de l'animal sans traction excessive sur les pattes antérieures, ce qui pourrait gêner sa ventilation